

☆介護保険レンタル対象品

車いす用横方向乗入れスロープ

『ケアスロープJC』



ケアメディックス株式会社

【ケアスロープJC】が誕生した理由

設置前



設置後



◆玄関にスロープが置けず、掃き出し窓から出入りをしたいけれど、

①スペースが無いため、スロープの設置ができない・・・

(※左記写真を参照)

②住宅改修ができない・・・

③借家のため、整地が出来ず昇降機が置けない・・・

など、様々な条件により対応ができないケースがあります。

そのような状況を解決するには、どうしたらよいか・・・

そこで考案したのが【ケアスロープJC】です!!

⇒従来のスロープ、昇降機、住宅改修といった選択肢に、
【JC】が加わります。

【ケアスロープJC】のご紹介①

☆掃き出し窓からL字型に出入りができ、
設置場が平らでなくても、簡単で安全
に設置ができる用具です。

◆適応スロープは、CS150～CS285C


◆適応段差は、30cm～50cmまで対応

◆介護保険レンタル対象品



ケアスロープJCとは

スロープパーツA(ケアスロープ®)とスロープパーツB(CS-JC)を組合せた
車いす用横方向乗入れスロープです。

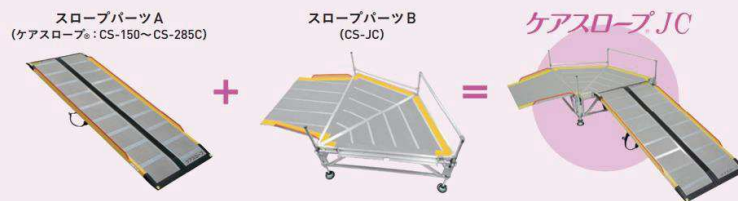


◆運搬・取り扱いがしやすく、
コンパクトに収納




☆現在お取扱いいただいている【ケアスロープ】の稼働率UPに繋がります。

【ケアスロープ】C】 のご紹介②

◆工具は不要!! フリーアジャスト機構で設置も簡単♪ (約5分)

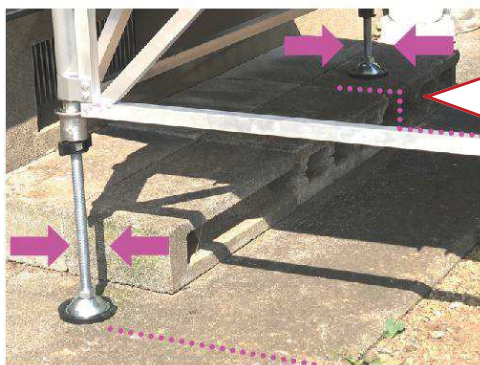

脚部（4本）はアジャスター仕様なので、地面の状況に合わせて、それぞれ高さが変わられます。

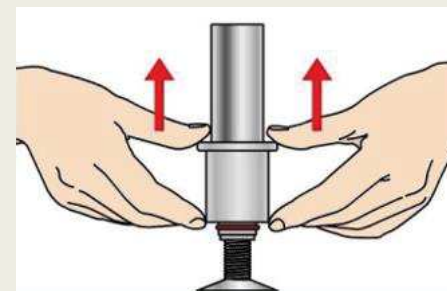

フリーアジャスト機構・・・
ナットを上方向に引き上げることで、
高さ調節を簡単に行えます。

◆左右どちらでも、設置可能



【ケアスロープJC】の動画

【製品紹介】



https://youtu.be/zTmjvE_g7pI

【使用方法】



<https://youtu.be/mD5Ogp-ogJg>

ケアスロープJC 設置事例 ①



- ・ 玄関からの出入りができないため、掃き出し窓にケアスロープJCを設置。床から掃き出し窓までは高さ38cm。スロープは【CSJC-175】を使用。
- ・ スロープで靴脱ぎ石を回避することができた例。

ケアスロープJC 設置事例 ②



- ・靴脱ぎ石とエアコンの室外機があるため、昇降機が置けない。高さ50cmの掃き出し窓への設置事例。スロープは【CSJC-285】を使用。
- ・靴脱ぎ石にCS-JCの脚部を乗せ、CS-JCのフラップを斜めに設置して室外機を回避。

ケアスロープJC 設置事例 ③



- ・ 掃き出し窓を出た通路のすぐ横が土留め石で、昇降機が設置できないケース。
- ・ 掃き出し窓の高さは35cm。スロープは【CSJC-240】を使用。

ケアスロープJC 設置事例 ④



【駐車場】




- ・庭から駐車場まで小さい段差があるが、ケアスロープJCを使用することで家から駐車場に車いすで移動ができるようになった。
- ・スロープは【CSJC-240】を使用。

ケアスロープJC 設置事例 ⑤



- ・ 隣の家との境に柵があり、1本のスロープでは対応ができず、ケアスロープJCで対応をした。
- ・ 掃き出し窓の高さは48cm。スロープは【CSJC-285】を使用。

【ケアスロープ】C】 サイズ目安表

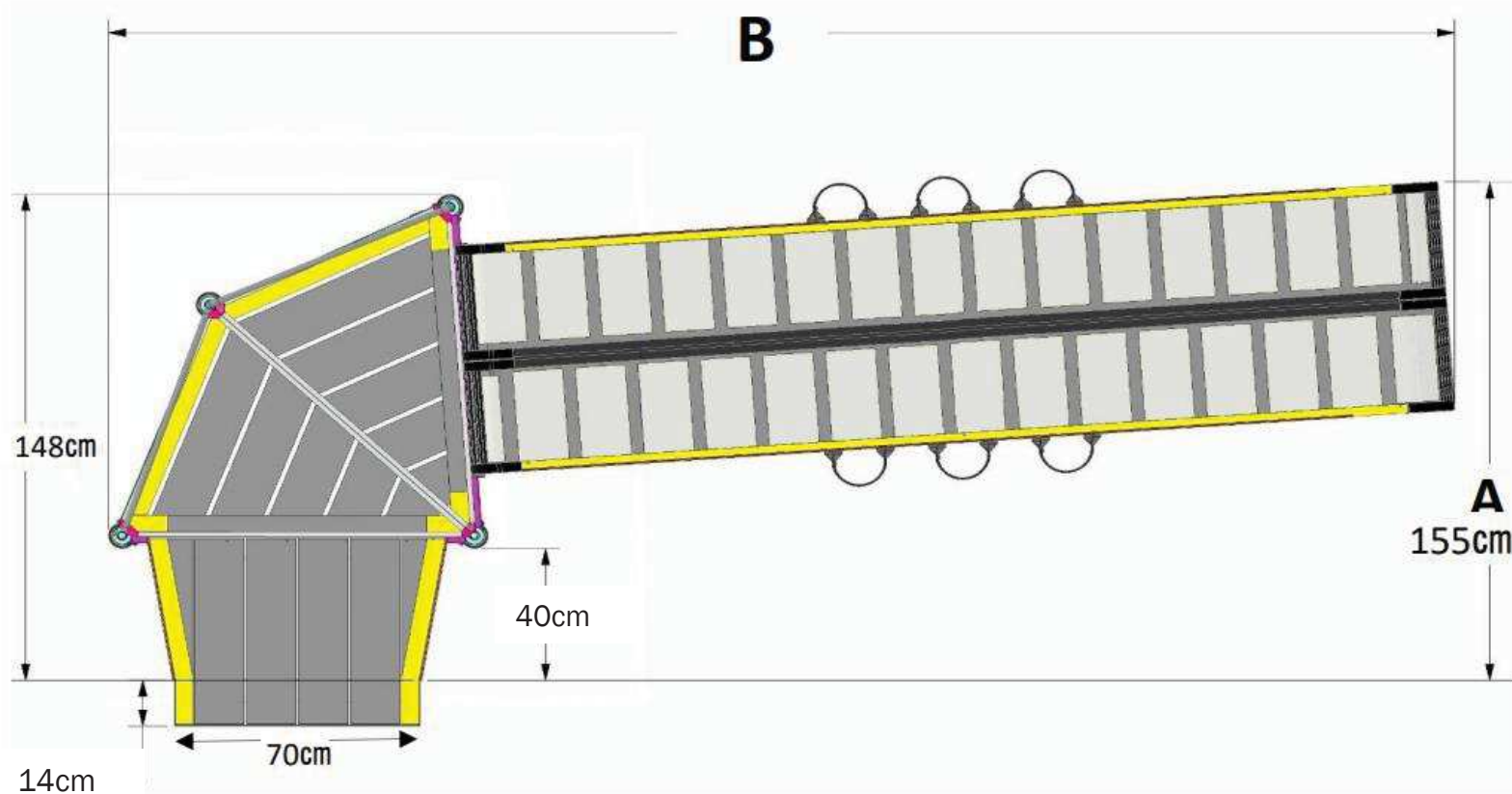

型番	適応段差	使用スロープ	傾斜角度	必要設置奥行寸法		必要設置幅寸法	
 CSJC-150	30cm	CS-150	12°	A 【155cm以上】	B	【251cm以上】	
 CSJC-175	30cm	CS-175	10°			【276cm以上】	
 CSJC-200	35cm	CS-200	10°			【297cm以上】	
 CSJC-240C	40cm	CS-240C	10°			【340cm以上】	
 CSJC-285C	50cm	CS-285C	10°			【384cm以上】	

【 FAQ 】

Q) ケアスロープJCは、外に出したままの状態でも大丈夫ですか？

⇒『ケアスロープ』と『フラップ』以外は、外に出したままで構いません。

Q) 掃き出し窓の高さが50cm以上ある場合、使用することは可能ですか？

⇒対応しておりません。

Q) フラップの代わりに、ケアスロープを付け足すことは可能ですか？

⇒対応しておりません。

Q) ジョイント台（CS-J）を付け足して、使用することは可能ですか？

⇒対応しておりません。

Q) ケアスロープ以外を取り付けることは可能ですか？

⇒他社スロープは使用できません。